

TEST PAR APPLICATION LOCALE

Important : réalisez toujours un test sur une zone discrète de la peau de façon à vérifier l'apparition d'une éventuelle réaction cutanée. Patientez pendant 24 heures. En cas de réaction, cessez tout traitement.

INFORMATIONS

- Il est possible que vos dents deviennent légèrement sensibles pendant le traitement. Ceci est tout à fait normal.
- Le cou est tonifié et raffermi par stimulation des muscles à l'aide de massages légers et doux. En cas de gêne, utilisez davantage de gel conducteur, réduisez l'intensité de l'appareil en appuyant sur le bouton – ou retirez l'appareil de la zone traitée.
- N'utilisez PAS l'appareil à proximité d'un équipement à ondes courtes ou à microondes.
- Utilisez toujours le 60 Second Neck Toner avec du gel conducteur. Pour vous réapprovisionner en gel conducteur, veuillez appeler notre service clientèle au : +44 (0) 1242 702345.
- L'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez PAS de solvants ni de détergents.
- Ne plongez PAS l'appareil dans de l'eau.
- L'appareil ne renferme aucun composant pouvant être remplacé par l'utilisateur.
- Ne démontez PAS l'appareil et ne tentez PAS de le réparer. En cas de difficultés d'utilisation, contactez le service clientèle.
- Si l'appareil est endommagé, cessez toute utilisation. En cas de panne, l'appareil doit être remplacé par Rio, son agent d'entretien ou toute autre personne possédant les qualifications requises, afin d'éviter tout danger.
- Si ce produit se comporte de manière imprévue, il est possible que des interférences électromagnétiques externes soient en cause. Vous devez éliminer cette source d'interférences et remettre en marche le produit pour qu'il fonctionne à nouveau correctement.

REJET



En fin de vie de l'appareil, veuillez vous en débarrasser comme il convient et conformément aux exigences des autorités locales, à défaut de quoi veuillez le renvoyer à : The Dezac Group Ltd., Cheltenham, PO Box 54, GL14 2WW, Royaume-Uni. Il est IMPÉRATIF de ne pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers.

SERVICE CLIENTÈLE

Si vous avez des questions ou des difficultés à utiliser cet appareil, veuillez contacter notre service clientèle au : +44 (0)1242 702345 ou nous envoyer un courrier électronique à l'adresse : online@riobeauty.com

Pour vous abonner en ligne à notre garantie de deux ans, veuillez vous rendre sur le site : www.riobeauty.com/warranty_online.htm

INGRÉDIENTS

GEL CONDUCTEUR : AQUA, PEG-40 CASTOR OIL, CARBOMER, PHENOXYTHANOL, TRIETHANOLAMINE, IMIDAZOLIDINYL UREA, METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN, CI 42090

CONFORME À L'ENSEMBLE DES RÈGLEMENTS EUROPÉENS SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS COSMÉTIQUES.




Rio, Dezac and 60 Second Neck Toner are trademarks of The Dezac Group Ltd © The Dezac Group Ltd 2008 PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.riobeauty.com



60 SECOND NECK TONER™

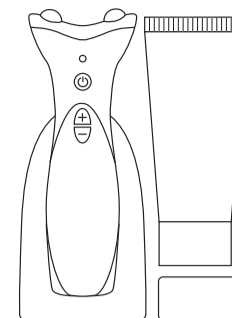

PRÉCAUTIONS

- Veuillez lire attentivement l'ensemble du mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.
- N'utilisez PAS l'appareil si vous êtes enceinte ou dans les cas suivants : pacemaker, problèmes cardiaques, épilepsie, diabète, sclérose en plaques ou convalescence suite à une opération.
- N'utilisez PAS l'appareil sur des parties de la peau qui présentent les conditions suivantes : acné rosacée, acné pustuleuse, peau scarifiée, peau sensible, cicatrices, grains de beauté, varices, etc.
- En cas de contact avec les yeux, éliminez le gel en rinçant abondamment avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consultez votre médecin.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants et des animaux.
- Nous recommandons d'utiliser le 60 Second Neck Toner pendant une durée maximale de 60 secondes par zone de traitement et de 3 minutes au total par session.

1-IN-NECK-F/1.1

TEST PAR APPLICATION LOCALE

Important : réalisez toujours un test sur une zone discrète de la peau de façon à vérifier l'apparition d'une éventuelle réaction cutanée. Patientez pendant 24 heures. En cas de réaction, cessez tout traitement.

INFORMATIONS

- Il est possible que vos dents deviennent légèrement sensibles pendant le traitement. Ceci est tout à fait normal.
- Le cou est tonifié et raffermi par stimulation des muscles à l'aide de massages légers et doux. En cas de gêne, utilisez davantage de gel conducteur, réduisez l'intensité de l'appareil en appuyant sur le bouton – ou retirez l'appareil de la zone traitée.
- N'utilisez PAS l'appareil à proximité d'un équipement à ondes courtes ou à microondes.
- Utilisez toujours le 60 Second Neck Toner avec du gel conducteur. Pour vous réapprovisionner en gel conducteur, veuillez appeler notre service clientèle au : +44 (0) 1242 702345.
- L'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez PAS de solvants ni de détergents.
- Ne plongez PAS l'appareil dans de l'eau.
- L'appareil ne renferme aucun composant pouvant être remplacé par l'utilisateur.
- Ne démontez PAS l'appareil et ne tentez PAS de le réparer. En cas de difficultés d'utilisation, contactez le service clientèle.
- Si l'appareil est endommagé, cessez toute utilisation. En cas de panne, l'appareil doit être remplacé par Rio, son agent d'entretien ou toute autre personne possédant les qualifications requises, afin d'éviter tout danger.
- Si ce produit se comporte de manière imprévue, il est possible que des interférences électromagnétiques externes soient en cause. Vous devez éliminer cette source d'interférences et remettre en marche le produit pour qu'il fonctionne à nouveau correctement.

REJET



En fin de vie de l'appareil, veuillez vous en débarrasser comme il convient et conformément aux exigences des autorités locales, à défaut de quoi veuillez le renvoyer à : The Dezac Group Ltd., Cheltenham, PO Box 54, GL14 2WW, Royaume-Uni. Il est IMPÉRATIF de ne pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers.

SERVICE CLIENTÈLE

Si vous avez des questions ou des difficultés à utiliser cet appareil, veuillez contacter notre service clientèle au : +44 (0)1242 702345 ou nous envoyer un courrier électronique à l'adresse : online@riobeauty.com

Pour vous abonner en ligne à notre garantie de deux ans, veuillez vous rendre sur le site : www.riobeauty.com/warranty_online.htm

INGRÉDIENTS

GEL CONDUCTEUR : AQUA, PEG-40 CASTOR OIL, CARBOMER, PHENOXYTHANOL, TRIETHANOLAMINE, IMIDAZOLIDINYL UREA, METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN, CI 42090

CONFORME À L'ENSEMBLE DES RÈGLEMENTS EUROPÉENS SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS COSMÉTIQUES.




Rio, Dezac and 60 Second Neck Toner are trademarks of The Dezac Group Ltd © The Dezac Group Ltd 2008 PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.riobeauty.com



60 SECOND NECK TONER™

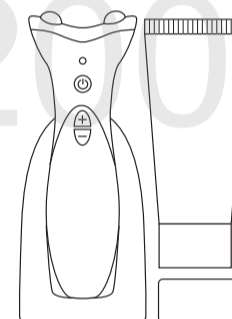


PRÉCAUTIONS

- Veuillez lire attentivement l'ensemble du mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.
- N'utilisez PAS l'appareil si vous êtes enceinte ou dans les cas suivants : pacemaker, problèmes cardiaques, épilepsie, diabète, sclérose en plaques ou convalescence suite à une opération.
- N'utilisez PAS l'appareil sur des parties de la peau qui présentent les conditions suivantes : acné rosacée, acné pustuleuse, peau scarifiée, peau sensible, cicatrices, grains de beauté, varices, etc.
- En cas de contact avec les yeux, éliminez le gel en rinçant abondamment avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consultez votre médecin.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants et des animaux.
- Nous recommandons d'utiliser le 60 Second Neck Toner pendant une durée maximale de 60 secondes par zone de traitement et de 3 minutes au total par session.

1-IN-NECK-F/1.1

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

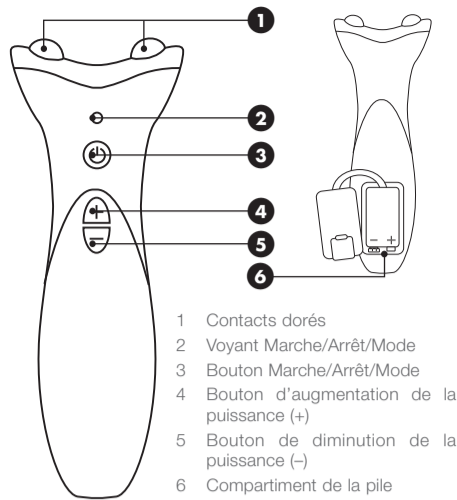

- 1 Contacts dorés
- 2 Voyant Marche/Arrêt/Mode
- 3 Bouton Marche/Arrêt/Mode
- 4 Bouton d'augmentation de la puissance (+)
- 5 Bouton de diminution de la puissance (-)
- 6 Compartiment de la pile


INFORMATIONS CONCERNANT LA PILE




Pour installer la pile, ouvrez le couvercle de son compartiment en libérant la languette. Branchez une pile alcaline PP3 de 9 V en veillant à placer le pôle positif + comme indiqué. Assurez-vous que le ruban de retrait se trouve sous la pile et remplacez le couvercle en veillant à ce qu'il s'enclenche correctement.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez la pile.
- N'utilisez PAS de piles rechargeables.
- Veuillez vous assurer que les piles sont jetées comme il convient et conformément aux exigences des autorités locales.


MODE D'EMPLOI

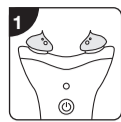


ÉTAPE 1
Appliquez une couche épaisse de gel conducteur sur chaque contact doré et sur la zone de traitement. Appliquez toujours une quantité généreuse de gel pour garantir un bon contact avec la peau.

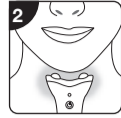

ÉTAPE 2
Placez l'appareil sur la zone de traitement 1 en posant les deux contacts dorés sur la peau.

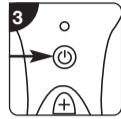


ÉTAPE 3
Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt/Mode. Le voyant vert s'allume. L'appareil commence le programme 1 et le voyant Marche/Arrêt/Mode clignote une fois.

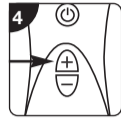

ÉTAPE 4
Augmentez la puissance en appuyant sur le bouton + jusqu'à ce que vous ressentiez clairement des contractions musculaires. En cas de gêne, diminuez la puissance en appuyant sur le bouton -. **REMARQUE** : la puissance peut uniquement être augmentée pendant la contraction.




ÉTAPE 5
Répétez les étapes 1 à 4 pour les zones de traitement 2 et 3.

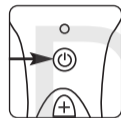


POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL
Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Si l'appareil est laissé allumé, il s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes.

ZONES DE TRAITEMENT

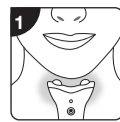

ZONE DE TRAITEMENT 1
Placez l'appareil sous le menton en posant les deux contacts dorés sur la peau. Prenez soin d'éviter la pomme d'Adam. Réglez la position de l'appareil de manière à obtenir une forte contraction musculaire. Maintenez l'appareil en place pendant 60 secondes.

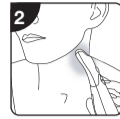


ZONE DE TRAITEMENT 2
Placez l'appareil sous le menton, à gauche, en posant les deux contacts dorés sur la peau près de l'emplacement de votre pouls. Réglez à nouveau la position de l'appareil pour obtenir une contraction musculaire optimale. Maintenez l'appareil en place pendant 60 secondes.



ZONE DE TRAITEMENT 3
Placez l'appareil sous le menton, à droite, en posant les deux contacts dorés sur la peau près de l'emplacement de votre pouls. Réglez à nouveau la position de l'appareil pour obtenir une contraction musculaire optimale. Maintenez l'appareil en place pendant 60 secondes.

PROGRAMMES

Le 60 Second Neck Toner possède 3 programmes d'exercice. Pour obtenir des résultats optimaux, variez les programmes utilisés. Nous recommandons d'utiliser le programme 1 le premier jour, suivi du programme 2 le deuxième jour et du programme 3 le troisième jour, et ainsi de suite.

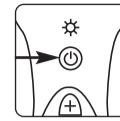

L'appareil commencera toujours par le programme 1. Pour sélectionner un programme différent, appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt/Mode. Le voyant clignote deux fois pour indiquer que le programme 2 a été sélectionné, ou 3 fois pour indiquer que le programme 3 a été sélectionné.

Programme 1 - Raffermissement

Conditionnement des muscles par contractions musculaires rythmiques, avec un bref intervalle entre les impulsions. Chaque contraction musculaire dure 2 secondes (voyant allumé), puis est suivie d'une pause de 3 secondes (voyant éteint).

Programme 2 - Raffermissement prolongé


Ce programme permet une contraction musculaire prolongée avec une variation d'intensité préprogrammée qui permet d'optimiser l'exercice. Chaque contraction musculaire prolongée dure 9 secondes (voyant allumé), puis est suivie d'une pause de 4 secondes (voyant éteint).

Programme 3 - Raffermissement par tapotements

Stimulation rapide simulant un massage en profondeur. Chaque massage par impulsions dure 5 secondes (voyant allumé), puis est suivi d'une pause de 3 secondes (voyant éteint).

Les impulsions procurent tout d'abord une légère sensation de picotement puis, au fur et à mesure de l'augmentation de l'intensité, vous commencerez à ressentir des contractions musculaires. **REMARQUE** : la puissance peut uniquement être augmentée pendant la contraction. Les contractions musculaires sont douces et commencent toutes par augmenter lentement, avant de se maintenir en position contractée pendant quelques secondes et de disparaître progressivement.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

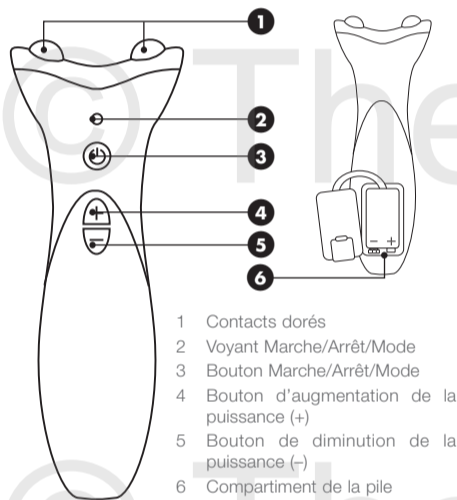

- 1 Contacts dorés
- 2 Voyant Marche/Arrêt/Mode
- 3 Bouton Marche/Arrêt/Mode
- 4 Bouton d'augmentation de la puissance (+)
- 5 Bouton de diminution de la puissance (-)
- 6 Compartiment de la pile


INFORMATIONS CONCERNANT LA PILE



Pour installer la pile, ouvrez le couvercle de son compartiment en libérant la languette. Branchez une pile alcaline PP3 de 9 V en veillant à placer le pôle positif + comme indiqué. Assurez-vous que le ruban de retrait se trouve sous la pile et remplacez le couvercle en veillant à ce qu'il s'enclenche correctement.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez la pile.
- N'utilisez PAS de piles rechargeables.
- Veuillez vous assurer que les piles sont jetées comme il convient et conformément aux exigences des autorités locales.


MODE D'EMPLOI

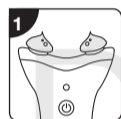


ÉTAPE 1
Appliquez une couche épaisse de gel conducteur sur chaque contact doré et sur la zone de traitement. Appliquez toujours une quantité généreuse de gel pour garantir un bon contact avec la peau.



ÉTAPE 2
Placez l'appareil sur la zone de traitement 1 en posant les deux contacts dorés sur la peau.

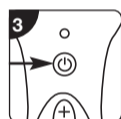


ÉTAPE 3
Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt/Mode. Le voyant vert s'allume. L'appareil commence le programme 1 et le voyant Marche/Arrêt/Mode clignote une fois.

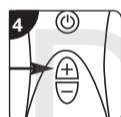

ÉTAPE 4
Augmentez la puissance en appuyant sur le bouton + jusqu'à ce que vous ressentiez clairement des contractions musculaires. En cas de gêne, diminuez la puissance en appuyant sur le bouton -. **REMARQUE** : la puissance peut uniquement être augmentée pendant la contraction.



ÉTAPE 5
Répétez les étapes 1 à 4 pour les zones de traitement 2 et 3.

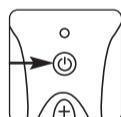

POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL
Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Si l'appareil est laissé allumé, il s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes.

ZONES DE TRAITEMENT



ZONE DE TRAITEMENT 1
Placez l'appareil sous le menton en posant les deux contacts dorés sur la peau. Prenez soin d'éviter la pomme d'Adam. Réglez la position de l'appareil de manière à obtenir une forte contraction musculaire. Maintenez l'appareil en place pendant 60 secondes.



ZONE DE TRAITEMENT 2
Placez l'appareil sous le menton, à gauche, en posant les deux contacts dorés sur la peau près de l'emplacement de votre pouls. Réglez à nouveau la position de l'appareil pour obtenir une contraction musculaire optimale. Maintenez l'appareil en place pendant 60 secondes.



ZONE DE TRAITEMENT 3
Placez l'appareil sous le menton, à droite, en posant les deux contacts dorés sur la peau près de l'emplacement de votre pouls. Réglez à nouveau la position de l'appareil pour obtenir une contraction musculaire optimale. Maintenez l'appareil en place pendant 60 secondes.

PROGRAMMES

Le 60 Second Neck Toner possède 3 programmes d'exercice. Pour obtenir des résultats optimaux, variez les programmes utilisés. Nous recommandons d'utiliser le programme 1 le premier jour, suivi du programme 2 le deuxième jour et du programme 3 le troisième jour, et ainsi de suite.



L'appareil commencera toujours par le programme 1. Pour sélectionner un programme différent, appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt/Mode. Le voyant clignote deux fois pour indiquer que le programme 2 a été sélectionné, ou 3 fois pour indiquer que le programme 3 a été sélectionné.

Programme 1 - Raffermissement

Conditionnement des muscles par contractions musculaires rythmiques, avec un bref intervalle entre les impulsions. Chaque contraction musculaire dure 2 secondes (voyant allumé), puis est suivie d'une pause de 3 secondes (voyant éteint).

Programme 2 - Raffermissement prolongé

Ce programme permet une contraction musculaire prolongée avec une variation d'intensité préprogrammée qui permet d'optimiser l'exercice. Chaque contraction musculaire prolongée dure 9 secondes (voyant allumé), puis est suivie d'une pause de 4 secondes (voyant éteint).

Programme 3 - Raffermissement par tapotements

Stimulation rapide simulant un massage en profondeur. Chaque massage par impulsions dure 5 secondes (voyant allumé), puis est suivi d'une pause de 3 secondes (voyant éteint).

Les impulsions procurent tout d'abord une légère sensation de picotement puis, au fur et à mesure de l'augmentation de l'intensité, vous commencerez à ressentir des contractions musculaires. **REMARQUE** : la puissance peut uniquement être augmentée pendant la contraction. Les contractions musculaires sont douces et commencent toutes par augmenter lentement, avant de se maintenir en position contractée pendant quelques secondes et de disparaître progressivement.