

SALON LASER TWEEZER™

user guide



FRANÇAIS

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat. L'épilation au laser apporte une solution sur le long terme à la réduction permanente du poil. Le traitement des poils pour éliminer la racine est très efficace et offre des résultats durables. En réalisant vous-même un traitement à domicile, vous économiserez toute une série de déplacements coûteux chez l'esthéticienne. De par sa nature même, le traitement au laser est relativement lent par rapport aux méthodes d'épilation temporaires. Toutefois, le temps investi est plus que justifié par la permanence des résultats obtenus. Il est important de bien comprendre le procédé et plus particulièrement le cycle de pousse du poil. Ce guide d'utilisation va vous aider à obtenir la réduction de pilosité que vous recherchez. Nous vous prions donc de le lire attentivement.

Si vous avez des questions à poser ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à appeler nos représentants du service clientèle au +44 (0)1242 702345. Ils se feront un plaisir de vous aider à obtenir les meilleurs résultats avec votre Salon Laser Tweezer.



Il est impératif d'utiliser cet appareil de manière responsable.

Avant toute utilisation, lisez attentivement l'ensemble du mode d'emploi et conserver celui-ci afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.

- 1 Appicateur
- 2 Prise de courant CC (à l'arrière)
- 3 Interrupteur à clé
- 4 Bouton d'activation
- 5 Bouton d'augmentation de la puissance (+)
- 6 Bouton de diminution de la puissance (-)
- 7 Indicateurs de niveau de puissance
- 8 Bouton de traitement de l'appicateur
- 9 Gaine du laser
- 10 Capteurs de peau de l'appicateur
- 11 Lumière orange de l'appicateur
- 12 Lumière blanche de l'appicateur
- 13 Ouverture du laser
- 14 Adaptateur secteur
- 15 Clés



NOTICE D'AVERTISSEMENT

- Lisez attentivement l'ensemble du mode d'emploi et conserver-le afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.
- Ne convient pas aux peaux afro-antillaises ou noires. Ne convient pas aux cheveux blancs.
- L'épilation au laser n'est pas censée causer de gêne. Si vous ressentez une gêne ou une douleur, il se peut que le réglage soit trop élevé ou que ce produit ne soit pas adapté à votre teint (couleur de la peau).
- Les niveaux de puissance doivent être sélectionnés en fonction du type de peau, conformément à la section intitulée « Types de peau Fitzpatrick ».
- Ne traitez pas les parties suivantes de la peau : tatouages, boutons, verrues, points noirs, taches de naissance, brûlures, mamelons, eczéma, cils ou poils à proximité des yeux.
- Ne traitez PAS les mêmes poils / la même zone de manière répétée pendant une même séance.
- Les dispositifs de sécurité intégrés protègent les yeux contre toute exposition au rayon laser. Toutefois, ne tenez jamais l'applicateur en direction des yeux ou à proximité.
- N'utilisez PAS l'appareil après avoir consommé de l'alcool ou si vous ne vous sentez pas bien ou vous sentez fatigué(e).
- N'utilisez PAS l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
- Danger de réflexion : veuillez ôter les bijoux situés à proximité de la zone à traiter avant utilisation.
- Maintenez l'appareil hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ne convient pas aux enfants âgés de 14 à 17 ans sans supervision parentale.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, rangez la clé dans un endroit sûr, à l'écart des enfants.
- Toute utilisation abusive de l'appareil peut entraîner des blessures.
- Ne passez PAS outre les fonctions de sécurité et n'ouvrez PAS l'appareil.
- Cet appareil ne convient pas aux personnes qui possèdent des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

COMMENT LES LASERS FONCTIONNENT-ILS ?

Les lasers émettent un rayon de lumière intense, composé d'une seule longueur d'onde ou couleur. La peau est essentiellement transparente aux rayons de lumière dont la longueur d'onde est comprise entre 600 et 1 100 nm (nanomètres), tandis que les structures qui contiennent de la mélanine absorbent l'énergie laser de cette longueur d'onde. Il est ainsi possible de cibler le follicule pileux qui présente une concentration de mélanine sans attaquer la zone environnante.

L'énergie de la lumière absorbée par le pigment de mélanine se traduit par l'échauffement rapide du follicule pileux. Cette chaleur détruit les cellules (papilles) responsables de la croissance du poil. Lorsque la température adéquate est atteinte, le follicule est désactivé de manière permanente, ce qui se traduit par une réduction permanente de la pousse des poils.

TYPES DE PEAU ADAPTÉS

La mélanine qui se trouve dans l'épiderme absorbe également de l'énergie et limite la profondeur de pénétration du laser dans la peau. Le fait d'utiliser une longueur d'onde lumineuse de 808 nm permet en fait d'assurer le traitement des types de peau foncés ainsi que des types de peau clairs. Toutefois, l'épilation

laser n'est pas adaptée pour les peaux afro-antillaises ou noires. L'épilation laser est également inefficace pour éliminer les poils blancs ou gris. L'électrolyse constitue une autre possibilité de traitement à envisager.

TEST PAR APPLICATION LOCALE

A titre indicatif, les couleurs de la peau sont classifiées selon les phototypes de peau Fitzpatrick décrits ci-contre.

24 heures avant le traitement, vérifiez la réaction de votre peau en faisant un essai sur quelques poils de la zone à traiter.



Les touches (+) et (-) augmentent et réduisent les niveaux de puissance. Traitez 2 à 3 poils pour chaque niveau de puissance, jusqu'au niveau de puissance maximum autorisé pour votre type de peau (voir le tableau ci-dessous). En cas de gêne, choisissez le niveau de puissance inférieur : il correspond au niveau de puissance maximum qu'il vous est recommandé d'utiliser.

Au bout de 24 heures, si des rougeurs ou des inflammations apparaissent sur la zone d'un des niveaux de puissance, choisissez le niveau de puissance inférieur pour le traitement.

REMARQUE : la couleur de la peau varie en fonction des parties du corps. Il se peut que vous deviez choisir des réglages différents en fonction des zones à traiter. Testez toutes les parties du corps pour connaître le niveau de puissance maximal à utiliser.


PHOTOTYPES DE PEAU FITZPATRICK

Les niveaux de puissance doivent être sélectionnés en fonction du type de peau, comme indiqué ci-dessous.

Type de peau	Couleur de peau	Historique de bronzage	Niveau de puissance maximum
I	Très claire, « translucide »	Attrape toujours des coups de soleil, ne bronze jamais.	<p>Sous réserve des résultats du test par application locale, les 5 niveaux de puissance peuvent être utilisés.</p>  <p>5 4 3 2 1</p>
II	Claire	Attrape toujours des coups de soleil	
III	Claire à légèrement mate	Attrape de légers coups de soleil	<p>Sous réserve des résultats du test par application locale, les niveaux de puissance 1, 2 et 3 peuvent être utilisés.</p>  <p>3 2 1</p>
IV	Mate/Très foncée	Attrape rarement des coups de soleil, bronze facilement.	
V	Très foncée	Attrape très rarement des coups de soleil.	<p>NON adaptée à l'épilation laser</p>
VI	Noire	N'attrape jamais de coups de soleil.	


PROCÉDURE DE TRAITEMENT

- **N'utilisez aucune méthode d'épilation consistant à arracher les poils de leur follicule, car ceci rendra le traitement inefficace.**
- **Retirez tous les bijoux qui se trouvent à proximité de la zone à traiter.**
- **Veillez à tester la zone à traiter par application locale 24 heures avant le traitement et à connaître le niveau de puissance maximal à utiliser.**

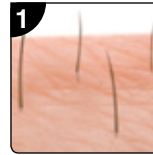


ÉTAPE 1

Le poil doit être suffisamment visible pour que le laser puisse cibler la zone qui entoure sa base. Les poils longs peuvent être raccourcis avant le traitement, si nécessaire.

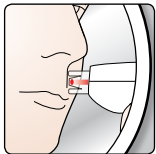

L'utilisation d'un miroir peut s'avérer pratique pour traiter les zones difficiles à voir, telles que le visage et les aisselles. Un miroir grossissant 5 à 10 fois est parfait pour cela.

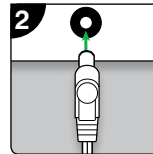

ÉTAPE 2

Branchez l'adaptateur à l'arrière de l'appareil, puis sur une prise de courant.

PROCÉDURE DE TRAITEMENT




ÉTAPE 3

À l'aide de la clé, déverrouillez l'interrupteur à clé.

L'appareil émet 3 bips sonores et le bouton du premier niveau de puissance clignote en bleu.


ÉTAPE 4

Saisissez le code de sécurité en appuyant sur les boutons indiqués en noir dans l'ordre suivant :

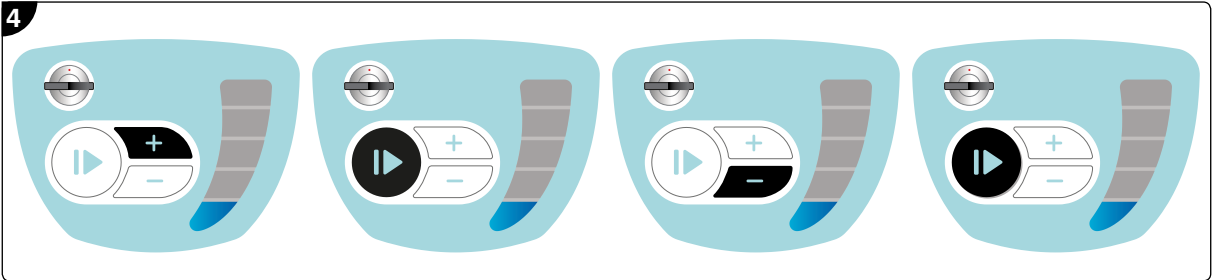

Remarque : l'appareil s'éteint lorsque le code saisi est incorrect. Mettez la clé en position d'arrêt, patientez pendant quelques secondes, puis remettez-la en position de marche et saisissez le bon code de sécurité.


PROCÉDURE DE TRAITEMENT

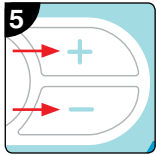

ÉTAPE 5

Utilisez les boutons + et - pour sélectionner le niveau de puissance.


Important : ne dépassez pas le niveau de puissance maximal correspondant à votre type de peau.

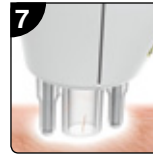

ÉTAPE 7

Placez l'applicateur sur le poil que vous souhaitez traiter. Assurez-vous que les deux capteurs sont en contact avec la peau (vous devrez peut-être appliquer une légère pression).

Une lumière blanche s'allume pour indiquer que l'appareil est prêt.

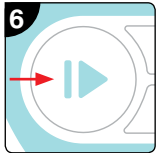


ÉTAPE 6

Appuyez une fois sur le bouton d'activation. Le(s) bouton(s) de niveau de puissance sélectionné(s) s'allume(nt) complètement et l'applicateur émet une lumière orange.



Remarque : à chaque réglage du niveau de puissance, vous devrez appuyez sur le bouton d'activation pour continuer.

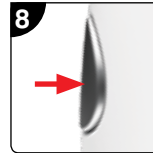

ÉTAPE 8


Appuyez À MOITIÉ sur le bouton de traitement de l'applicateur.

Une lumière rouge apparaît pour vous guider.



Vous pouvez déplacer l'applicateur tout en maintenant le contact avec la peau pour viser l'emplacement où le poil rencontre la peau. Assurez-vous que les deux capteurs restent bien en contact avec la peau.

PROCÉDURE DE TRAITEMENT

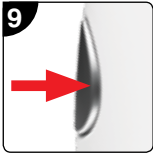


ÉTAPE 9

Appuyez **COMPLÈTEMENT** sur le bouton de l'applicateur pour commencer le traitement.




La lumière blanche s'éteint et le laser rouge devient visible. Vous entendrez une série de bips sonores.

Remarque : ne déplacez PAS l'applicateur pendant le traitement.

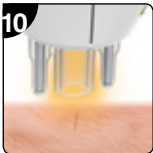

ÉTAPE 10

Lorsque le traitement s'arrête, la lumière orange s'allume à nouveau. Retirez brièvement les deux capteurs de la peau avant de passer au poil suivant. Retournez à l'étape 8 pour un nouveau traitement.

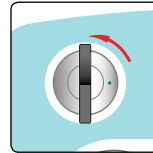


APRÈS L'UTILISATION

Faites tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position « OFF », pour verrouiller l'appareil. Retirez la clé et rangez-la dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants.

Remarques :

- Il est possible que vous ressentiez des petites piqûres pendant le traitement. Toutefois, la plupart des utilisateurs ne sentent rien.
- Il est parfois possible de sentir de légères odeurs de brûlé, voire même d'apercevoir une volute de fumée se dégager du poil au moment de son traitement.
- Les poils traités avec succès ne tombent pas toujours immédiatement, mais au fur et à mesure de leur libération par le follicule pileux. Un léger frottement encouragera leur chute.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'appareil passera en mode d'économie d'énergie au bout de 20 minutes. La lumière orange clignotera et le niveau de puissance 1 restera activé. Éteignez l'appareil à l'aide de la clé, puis rallumez-le afin de le réactiver et retournez à l'étape 4 de la procédure de traitement.

CYCLE DE CROISSANCE DES POILS

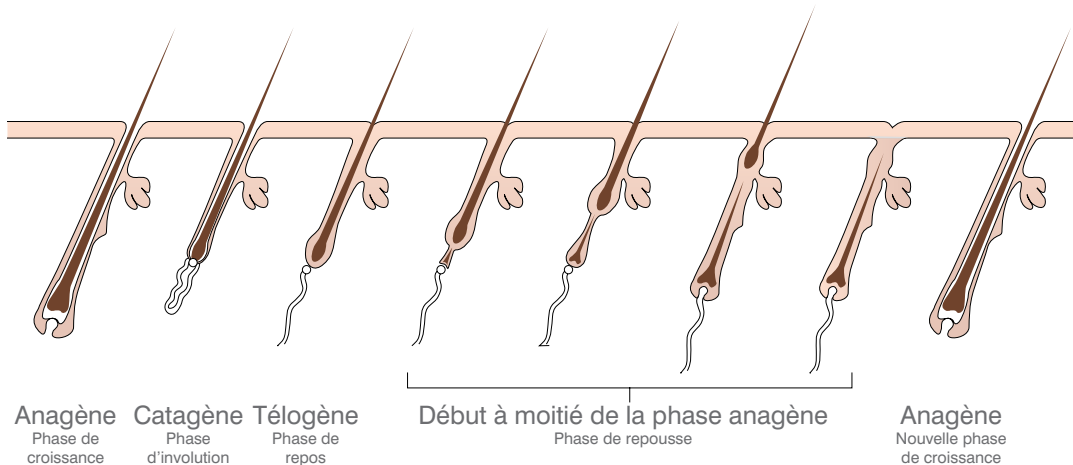

POURQUOI FAUT-IL EFFECTUER UNE SÉRIE DE TRAITEMENTS ?

La pousse des poils varie d'une personne à l'autre. Plusieurs facteurs entrent en jeu, dont l'âge, le poids, le métabolisme, les hormones, l'ethnicité et les médicaments. Toutefois tous les poils passent par trois phases de croissance distinctes :

La phase de croissance active (appelée la phase anagène), la phase de dégradation (phase catagène), pendant laquelle le poil cesse de grandir, mais ne tombe pas encore, et **la phase de repos (phase télogène)**, pendant laquelle le poil tombe et un nouveau poil commence à se former.

Le traitement au laser n'est efficace que lorsque le poil se trouve dans la phase de croissance active. À tout moment, il n'existe qu'un certain pourcentage de poils en phase de croissance active (ce pourcentage varie d'une partie du corps à l'autre). Certains follicules sont détruits, d'autres peuvent être réduits à ne produire que du duvet (vellus) et certains sont désactivés, ce qui aide à prévenir la repousse pileaire.

Vous devrez répéter la procédure plusieurs fois, sur plusieurs mois, pour traiter tous les poils en phase de croissance active (un minimum de six traitements sur six mois). Par la suite, un bref traitement toutes les 4 à 6 semaines est nécessaire pour s'assurer que les poils désactivés restent inactifs et pour garder une peau sans poils de façon permanente.

Partie du corps	Densité des follicules <small>par cm carré</small>	Phase de repos	Durée de la phase de repos	Croissance active
Tête	350	15 %	3 mois	83 %
Bras	80	18 %	5 mois	79 %
Jambes	60	18 %	6 mois	79 %
Barbe	500	68 %	10 semaines	30 %
Lèvre supérieure	350	64 %	6 semaines	34 %
Aisselles	65	28 %	3 mois	69 %
Poitrine/Dos	70	28 %	3 mois	69 %
Pubis	70	25 %	3 mois	71 %

QUESTIONS ET RÉPONSES

Comment préparer la peau à l'épilation au laser ?

Si l'épilation au laser ne nécessite aucune préparation spécifique de la peau, vous devez cependant vous assurer que votre peau est bien propre. Les meilleurs résultats sont obtenus sur peau claire : nous vous recommandons donc d'éviter de prendre le soleil, de vous exposer à des ultra-violets ou d'utiliser du bronzage artificiel.

Comment préparer les poils à l'épilation au laser ?

Le poil doit être suffisamment visible pour que le laser puisse cibler sa base. Les poils longs peuvent être raccourcis avant le traitement, si nécessaire.

Quel aspect ma peau aura-t-elle après le traitement ?

Généralement, aucun changement perceptible ne se produit. Il se peut qu'une légère rougeur apparaisse après le traitement, mais elle disparaîtra normalement au bout de 24 heures. Les rougeurs localisées qui peuvent apparaître après le traitement sont causées par la destruction des follicules pileux et sont parfaitement normales. Cependant, si ces rougeurs persistent au bout de 24 heures, ceci indique que vous avez choisi un niveau de puissance trop élevé pour votre type de peau. Veuillez vous référer à la section « Test par application locale ». Notez également que les rougeurs persistantes disparaîtront aussi.

Que faut-il éviter après une épilation au laser ?

Il est vivement recommandé d'éviter de s'exposer au soleil ou de se faire bronzer intensivement pendant une semaine au moins. En cas d'exposition de la peau, utilisez un écran solaire. Évitez également les produits nettoyants abrasifs ou les peelings. Évitez pendant 48 heures de nager dans de l'eau chlorée ou de vous immerger dans un bain à remous. Le chlore qui se trouve dans l'eau peut provoquer des irritations.

Quels soins sont recommandés après le traitement ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer sur votre peau une lotion apaisante non parfumée, un pack de glace ou une serviette humide pour refroidir la partie traitée. Veillez à maintenir les zones traitées particulièrement propres pendant 3 jours. Dans l'idéal, utilisez du savon antibactérien deux fois par jour. Lors du traitement des aisselles, évitez d'utiliser des déodorants anti-transpiration pendant 2 à 3 jours.

Avec quelle fréquence les traitements d'épilation au laser peuvent-ils être répétés ?

Tant que vous n'observez aucune rougeur, douleur ou inflammation au niveau du follicule pileux et de la peau qui l'entoure, le traitement peut être répété au bout de 24 heures. La plupart des utilisateurs patientent pendant 3 à 4 semaines avant de répéter les traitements afin de pouvoir identifier les poils

QUESTIONS ET RÉPONSES

qui sont tombés et ceux qui repoussent. L'intervalle entre les traitements de suivi n'est pas d'importance critique. Choisissez un intervalle qui vous convient. Évitez les traitements excessifs sur une même zone. Ceci risquerait de provoquer des rougeurs et des gonflements.

Combien de traitements seront nécessaires ?

La réduction pileuse au laser est généralement considérée efficace et permanente au bout de 6 traitements, réalisés sur une période de 6 mois. Les résultats varient d'une personne à l'autre et dépendent de la zone traitée, de la densité des poils, de leur cycle de croissance et de leur couleur. Les poils noirs sur de la peau claire répondent le mieux à la thérapie au laser, mais les poils noirs tout comme les poils blonds peuvent nécessiter plusieurs traitements pour obtenir des résultats sur le long terme. Il est possible que certains individus aient besoin de davantage de traitements, d'autres de moins, pour arriver à un résultat satisfaisant. Lors des premiers traitements, vous remarquerez progressivement un éclaircissement / une diminution de la pousse du poil sur la zone traitée. Des soins de suivi sont souvent nécessaires à long terme pour les femmes dont la croissance pileuse est excessive en raison d'hormones masculines.

Quelles parties du corps peuvent être traitées ?

La plupart des poils peuvent être éliminés à l'aide d'une épilation au laser. Les parties les plus habituelles sont le visage, les aisselles, les jambes, la poitrine, le dos et le maillot.

L'épilation au laser convient-elle aux peaux sensibles ?

Oui, le laser réagit au niveau du poil. La peau avoisinante ne sera donc pas touchée.

Quelle sensation les traitements procurent-ils ?

La plupart des utilisateurs ne sentent rien. Toutefois, il est possible que vous ressentiez une ou plusieurs sensations de picotement.

Quelle partie du poil dois-je viser ?

Il est essentiel de viser la base du poil, là où le poil rencontre la peau.

Est-il possible d'utiliser d'autres méthodes d'épilation entre les traitements ?

Les traitements au laser ayant besoin de la présence d'un poil dans le follicule pour fonctionner, les méthodes d'épilation qui consistent à arracher le poil (cire, épilateur, pince à épiler, par exemple) ne sont PAS adaptés entre les traitements. Le fait de se décolorer les poils n'est pas non plus adapté, car cela élimine le pigment et rend le laser inefficace. Les crèmes dépilatoires, le rasage et les disques de micro-dermabrasion conviennent parfaitement entre les traitements.

DÉPANNAGE

J'ai perdu mes clés.

- Prenez note du numéro de série de votre produit. Celui-ci se trouve sur le socle de l'appareil. Appelez notre service clientèle au +44 (0) 1242 702 345. Il se fera un plaisir de vous envoyer une clé de rechange.

Les voyants/lumières de l'appareil fonctionnent mais aucun laser n'est émis lorsque j'appuie sur le bouton.

- Assurez-vous que les 2 capteurs sont en contact avec la peau.

Les voyants/lumières de l'appareil ne fonctionnent pas.

- Vérifiez que l'adaptateur est bien branché sur une prise murale et que le cordon est parfaitement inséré au dos de l'appareil.
- Lorsque les commandes de l'appareil principal ou de l'applicateur ne sont pas utilisées pendant 20 minutes, l'appareil passe en mode d'économie d'énergie. Pour le réactiver, mettez la clé en position d'arrêt, puis remettez-la en position de marche.

L'appareil ne réagit pas et l'un des voyants de niveau de puissance clignote.

- Ceci indique un blocage. En cas de « blocage », réinitialisez tout simplement l'appareil en l'éteignant à l'aide de la clé. Patientez pendant 5 secondes avant de le rallumer.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

- Débranchez toujours l'adaptateur après utilisation et rangez-le dans un endroit situé hors de la portée des enfants.
- Rangez l'applicateur sur l'appareil principal et ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
- Ne démontez PAS l'appareil et ne tentez pas de le réparer. En cas de difficultés d'utilisation, contactez notre service clientèle.
- Toute utilisation abusive de l'appareil peut entraîner des blessures. Ne passez PAS outre les fonctions de sécurité et n'ouvrez pas l'appareil ou l'applicateur.
- Utilisez exclusivement ce produit avec l'adaptateur fourni.
- Pour protéger le laser, tenez l'appareil à l'écart des températures supérieures à 40 °C.
- Après avoir utilisé l'appareil, essuyez l'applicateur à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Vous pouvez également essuyer l'appareil principal.
- Une fois débranché, nettoyez régulièrement la gaine du laser et les capteurs de peau à l'aide d'un coton-tige pour garantir un fonctionnement optimal du laser.
- Ne plongez pas l'appareil principal ou l'applicateur dans de l'eau.
- Lorsque l'appareil se comporte de manière inattendue, il est possible que des interférences électromagnétiques externes en soient la cause. Vous devez éliminer cette source d'interférences et remettre l'appareil en marche afin qu'il fonctionne à nouveau correctement. Aucun laser ne sera émis involontairement.

SÉCURITÉ DE L'ARTICLE

En raison du caractère divergent du rayon laser, aucun danger de mort ni aucun risque pour la santé n'est encouru lorsque le rayon de laser est accidentellement dirigé vers des personnes, tant que la lentille n'a pas été touchée. Seuls Dezac Group ou ses agents d'entretien désignés sont habilités à ajuster le mécanisme du laser.

Cet article est conforme aux normes de sécurité européennes.

SERVICE CLIENTÈLE

Si vous avez des questions ou des difficultés à utiliser ce produit, veuillez contacter notre service clientèle Rio au **+44 (0)1242 702345** ou nous contacter par e-mail à l'adresse : **online@riobeauty.com**

Pour vous abonner en ligne à notre garantie de deux ans, veuillez vous rendre sur le site :

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

APPAREIL USAGÉ



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) a été mise en œuvre pour assurer le recyclage des produits à l'aide des meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter l'expansion des sites de décharge.

L'appareil appartient à la catégorie des équipements électriques et électroniques. Veuillez par conséquent vous en débarrasser comme il convient lorsqu'il atteint la fin de sa durée de service, conformément aux exigences des autorités locales. Il est **IMPÉRATIF** de ne pas le jeter avec les déchets ménagers.