

GO™

LASER HAIR REMOVER

guide d'utilisation



the beauty specialists

AVERTISSEMENTS

- **Veillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur électrique fourni.
- Cet appareil doit uniquement être alimenté en très basse tension correspondant aux données portées sur l'appareil.
- Ne convient pas aux peaux afro-antillaises, noires ni aux poils gris. Se reporter à la rubrique "Guide des types de peau et des intensités".
- L'épilation laser ne doit pas occasionner de gêne. Il se peut que vous sentiez le traitement ciblé des poils : la sensation s'apparente à une légère piqûre et un léger échauffement de la zone.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur, ceci peut être dû à un réglage trop élevé.

AVERTISSEMENTS

- Les dispositifs de sécurité intégrés protègent les yeux contre toute exposition au rayon laser. Toutefois, ne dirigez jamais l'appareil vers ou à proximité des yeux.
- Ne PAS utiliser à proximité de matériaux inflammables.
- Réverbération dangereuse : veuillez ôter tous les bijoux à proximité de la zone concernée avant utilisation.
- Ne pas traiter les mêmes poils plusieurs fois au cours d'une séance.
- Ne pas utiliser après avoir consommé de l'alcool, si vous ne vous sentez pas bien ou si vous êtes fatigué.
- Ne pas utiliser l'appareil sur les zones suivantes : tatouages, maquillage permanent, boutons, verrues, poils sur taches noires ou nævus, taches

AVERTISSEMENTS

de rousseur foncées, maladie de peau, marques de naissance, brûlures, lèvres, mamelons, zones génitales ou anales, eczéma, sourcils, près des yeux, sur les poils du nez ou des oreilles.

- Cet appareil est réactif au balayage laser. Il convient de faire attention à ne pas endommager le mécanisme de l'appareil.
- Ne PAS démonter ni réparer. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, contactez notre service après-vente.
- Toute utilisation inappropriée peut s'avérer dangereuse.
- Ne PAS forcer les fonctions de sécurité. Ne pas ouvrir l'appareil.
- Tenez l'appareil à l'écart des champs magnétiques forts et des aimants lors de son utilisation.

LA TECHNOLOGIE



TECHNOLOGIE LASER

L'épilateur Go Laser dirige un faisceau laser sur le follicule pileux libérant ainsi suffisamment d'énergie pour neutraliser, de façon permanente, la racine du poil sans endommager la périphérie. La pilosité est ainsi réduite de façon permanente. Simple à utiliser, l'épilation laser est indiquée pour éliminer la pilosité indésirable sur le visage ou le corps.


La peau et les poils renferment un pigment naturel appelé mélanine. La quantité de mélanine contenue dans la peau est le principal facteur qui détermine votre carnation. Elle est responsable du bronzage de la peau lors d'une exposition au soleil. La peau comme les follicules pileux contiennent différentes concentrations de mélanine.

Les lasers émettent un faisceau de lumière intense composé d'une seule longueur d'onde. Go Laser fonctionne selon une longueur d'onde qui cible spécifiquement la mélanine contenue dans le follicule pileux : le follicule pileux absorbe alors l'énergie générée par le laser.


L'absorption de l'énergie dégagée par le laser se traduit par un échauffement rapide du follicule pileux. Cette chaleur détruit les cellules responsables de la croissance du poil. Lorsque la température adéquate est atteinte, le follicule est neutralisé de façon permanente, ce qui se traduit par une réduction permanente de la pousse des poils. La peau est préservée car elle est essentiellement transparente à la lumière de cette plage de longueurs d'onde.

Il n'est possible de traiter un follicule pileux qu'en présence d'un poil. On obtient les meilleurs résultats lors de la pousse active des poils. Nous conseillons de procéder à six traitements, sur une période de six mois, pour parvenir à une réduction permanente de la pilosité. Des traitements d'entretien, ponctuels, peuvent s'avérer nécessaires pour venir à bout des poils récalcitrants.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE GO LASER

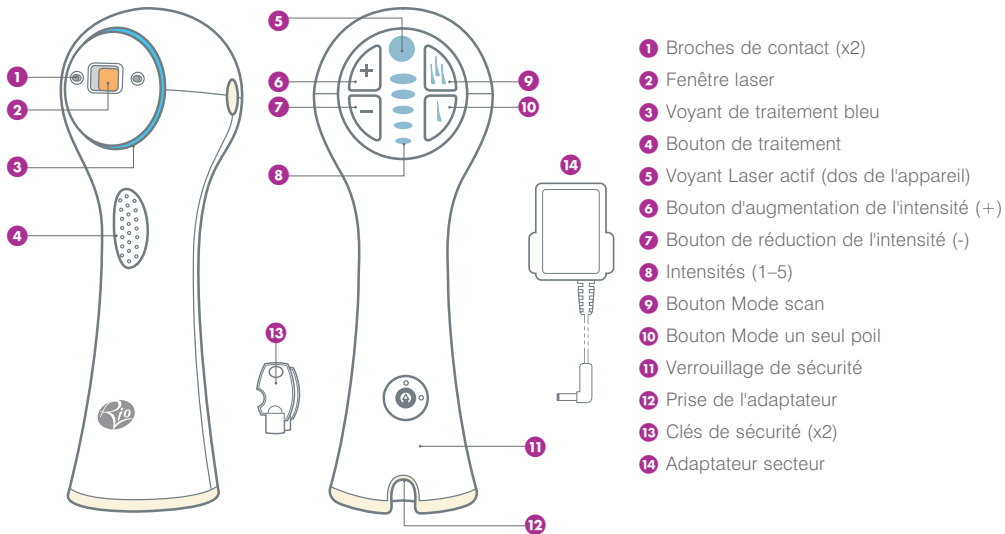


INTENSITÉS

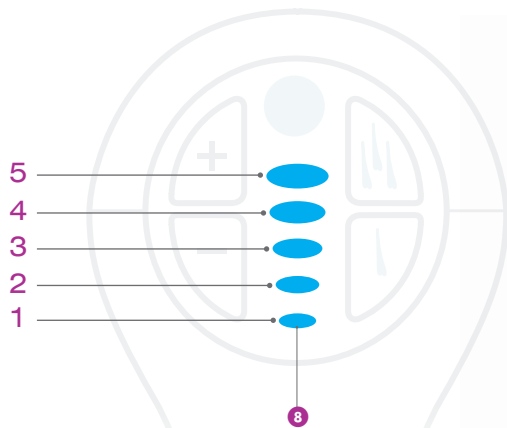

Sensations produites

Il se peut que vous sentiez le traitement ciblé des poils : la sensation s'apparente à une légère piqûre et un léger échauffement de la zone traitée. Toutefois, la plupart des personnes ne ressentent aucune sensation.

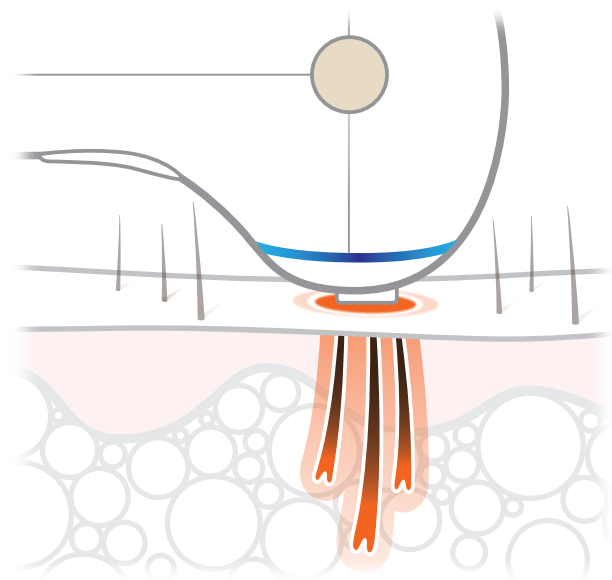

Dans quel cas ne pas utiliser Go Laser ?



L'épilation laser ne convient pas aux teints et aux types de poils suivants :

- Teints afro-antillais ou noirs – en raison d'une trop forte concentration en mélanine de la peau
- Poils blancs ou gris – en raison d'une concentration insuffisante de mélanine dans les poils.

Le tableau présenté en page suivante peut être utilisé pour déterminer si le recours à l'épilation laser est ou non adapté et, le cas échéant, l'intensité à sélectionner.



GUIDE DES TYPES DE PEAU ET DES INTENSITÉS

Carnation	Historique de bronzage	Intensité maximale
<p>Très claire, "translucide"</p> <p>Claire</p> <p>Claire à légèrement mate</p>	<p>Attrape toujours des coups de soleil, ne bronze jamais</p> <p>Attrape toujours des coups de soleil</p> <p>Attrape de légers coups de soleil</p>	 <p>Les 5 intensités peuvent être utilisées sous réserve des résultats du test épicutané</p>
<p>Mate/Foncée</p>	<p>Attrape rarement des coups de soleil, bronze facilement</p>	 <p>Les intensités 1,2 et 3 peuvent être utilisées sous réserve des résultats du test épicutané</p>
<p>Très foncée</p> <p>Noire</p>	<p>Attrape très rarement des coups de soleil</p> <p>N'attrape jamais de coups de soleil</p>	<p>Types de peau INCOMPATIBLES avec l'épilation laser</p>

PRISE EN MAIN

TEST ÉPICUTANÉ ✓

24 heures avant utilisation, vérifiez que votre peau ne réagit pas en commençant par effectuer un test sur une petite zone.

Les boutons + et - permettent d'augmenter ou de réduire l'intensité. Utilisez chaque intensité sur plusieurs zones jusqu'à atteindre l'intensité maximale adaptée à votre type de peau (reportez-vous au tableau). Quand vous ressentez une gêne, ceci signifie que l'intensité précédente, c'est-à-dire l'intensité inférieure, est l'intensité maximale que vous devez utiliser.

Votre peau peut légèrement rougir, mais ce n'est pas systématique, dans l'heure suivant l'utilisation. Cette rougeur localisée est parfaitement normale. Toutefois, si une rougeur persiste après 24 heures, ceci peut indiquer que l'intensité sélectionnée était trop élevée pour votre type de peau. Utilisez alors l'intensité inférieure pendant le traitement.

REMARQUE : la carnation de la peau diffère en fonction des parties du corps, vous constaterez donc peut-être que vous devez utiliser différentes intensités sur différentes parties de votre corps. Il convient de tester chaque zone, afin de déterminer l'intensité maximale adaptée.



Comment préparer la peau ?

Si l'épilation laser ne nécessite aucune préparation particulière de la peau, vous devez cependant toujours vous assurer que votre peau est bien propre. Les meilleurs résultats sont obtenus sur peaux claires : nous vous recommandons donc, dans la mesure du possible, d'éviter de prendre le soleil, de vous exposer à des ultra-violets ou d'utiliser du bronzage artificiel.

Comment préparer les poils ?

Rasez les zones à traiter. Le laser pénètre ainsi directement dans la racine du poil et évite de brûler les poils à la surface de la peau.

Sur quelles zones puis-je utiliser l'appareil ?

La plupart des poils peuvent être éliminés à l'aide de l'épilation laser. Les parties les plus habituelles sont le visage, les aisselles, les jambes, la poitrine, le dos et le maillot. Nous déconseillons l'utilisation de Go Laser sur les sourcils.

L'épilation laser convient-elle aux peaux sensibles ?

Oui, le laser réagit au niveau du poil. La peau avoisinante ne sera donc pas touchée.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Clé de sécurité

- La clé permet de verrouiller l'appareil en toute sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Insérez la clé de sécurité
- Pour déverrouiller, tournez la clé de sécurité dans le sens des aiguilles d'une montre : lorsque vous retirez la clé, la flèche doit pointer sur le point vert



Code de sécurité

Pour utiliser l'appareil, il faut saisir un code de sécurité :

- 1 Bouton d'augmentation de l'intensité (+)
- 2 Bouton Mode scan
- 3 Bouton de réduction de l'intensité (-)
- 4 Bouton Mode scan

pour modifier la séquence du code de sécurité, se reporter à la page 28.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ


Lorsque la séquence du code de sécurité est correctement saisie, l'appareil émet un bip sonore. Les voyants bleus situés autour du bouton Mode scan et du bouton Mode un seul poil clignotent : ils sont prêts à être sélectionnés. Le voyant indicateur de l'intensité la plus faible s'allume également.

Remarque : l'appareil se "verrouille" si le code saisi n'est pas correct. Tournez la clé de sécurité sur la position OFF, patientez pendant quelques secondes, puis retournez-la sur la position ON. Saisissez de nouveau le bon code de sécurité.

MODES DE TRAITEMENT


À chaque traitement, les modes de traitement ciblent de façon séquentielle chaque poil.

mode scan - plusieurs poils

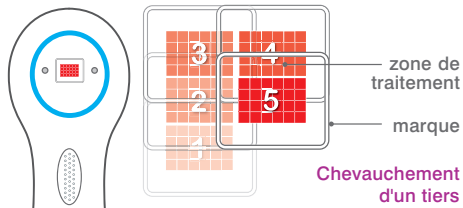


Le fait d'appliquer l'appareil sur la peau, en appuyant, laisse une petite marque. Pour vous assurer de couvrir efficacement la zone de traitement, il suffit d'appliquer l'appareil en chevauchant légèrement cette marque à chaque traitement.

mode un seul poil - un seul poil

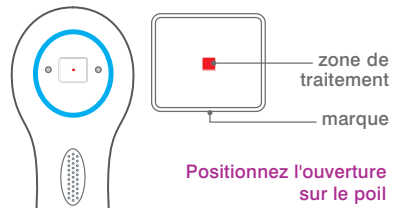


Le mode Un seul poil traite les zones restreintes. Il est donc particulièrement adapté aux poils isolés et récalcitrants.


UTILISATION

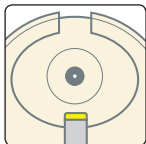

1. Branchez le câble de l'adaptateur électrique dans la fiche électrique, en bas de l'appareil, puis branchez sur le secteur.

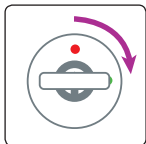


2. Déverrouillez l'appareil à l'aide de la clé de sécurité. Reportez-vous aux **dispositifs de sécurité** en page 15.

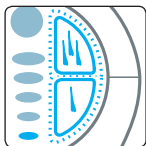


3. Saisissez le **code de sécurité** comme indiqué en page 15. Les voyants situés autour du bouton Mode scan et du bouton Mode un seul poil clignotent bleu, indiquant qu'ils sont prêts à être sélectionnés. Le voyant indicateur de l'intensité la plus faible s'allume également.

UTILISATION

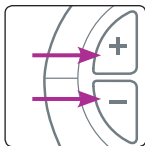


4. Sélectionnez l'intensité adaptée à votre type de peau à l'aide des boutons +/- . Reportez-vous au **guide des intensités** enpage 12, afin de déterminer l'intensité adaptée à votre type de peau.

Remarque : à chaque réglage de l'intensité, vous devez appuyer de nouveau sur le bouton Mode scan ou sur le bouton Mode un seul poil pour poursuivre.

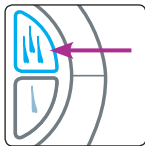


5. Sélectionnez le mode de traitement : soit le **mode Scan** soit le **mode Un seul poil**. (reportez-vous aux **modes de traitement** en page 17).

Remarque : lorsque vous passez d'un mode de traitement à un autre, vous entendez le laser se réinitialiser.

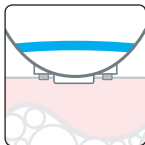


6. Positionnez l'appareil sur la zone que vous souhaitez épiler en vous assurant que les broches de contact sont bien en contact avec la peau. Go Laser est doté d'une fonction de détection de la peau. Lorsque l'appareil est correctement positionné, le voyant de traitement bleu s'allume.

UTILISATION

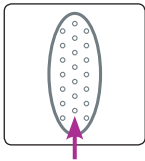

7. Appuyez sur le **bouton de traitement** et maintenez-le enfoncé pour débuter le traitement laser. Le voyant de traitement bleu clignote pour indiquer que le traitement laser est en cours et l'appareil émet des bips sonores réguliers. Vous pouvez alors passer à la zone suivante. Lorsque vous déplacez l'appareil sur la zone suivante, les broches de contact doivent être retirées brièvement.

Conseil : il est important de maintenir le contact entre l'appareil et la peau pendant le traitement.

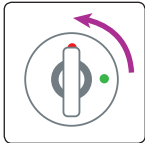

8. Éteignez l'appareil et verrouillez-le à l'aide de la clé de sécurité. Débranchez l'appareil, retirez la clé et rangez-les séparément. Rangez dans un endroit hors de portée des enfants.

Remarque : après 20 minutes, si vous n'avez appuyé sur aucun bouton, l'appareil passe en veille. Pour le redémarrer, tournez la clé sur la position OFF puis ON de nouveau.

Remarque : Si vous constatez un fonctionnement inattendu de cet appareil, ceci peut être dû à des interférences électromagnétiques externes : moteurs électriques/haut-parleurs par ex. Éloignez cette source d'interférences et redémarrez l'appareil pour rétablir un fonctionnement normal. À aucun moment le laser n'est émis involontairement.



SOINS POST-TRAITEMENT

Quel aspect ma peau aura-t-elle après le traitement ?

Généralement, aucun changement perceptible ne se produit. Une légère rougeur peut apparaître après le traitement, mais elle disparaît normalement au bout de 24 heures. Les rougeurs localisées qui peuvent apparaître après le traitement sont causées par la destruction du follicule pileux et sont parfaitement normales. Toutefois, si une rougeur persiste après 24 heures, ceci peut indiquer que l'intensité sélectionnée était trop élevée pour votre type de peau. Merci de vous reporter à la rubrique "Test épicutané". Notez également que les rougeurs persistantes disparaîtront aussi.

Que faut-il éviter après une épilation laser ?

Évitez de vous exposer au soleil ou un bronzage intense pendant au moins une semaine. Si vous vous exposez, utilisez de la crème solaire. Évitez également d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des soins corporels exfoliants. Évitez de vous baigner dans de l'eau chlorée ou dans un jacuzzi pendant 48 heures. Le chlore de l'eau peut provoquer des démangeaisons.

Dois-je effectuer des soins après l'épilation ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer une lotion apaisante sans parfum, une poche de glace ou une serviette humide pour refroidir les zones concernées. Pendant 3 jours, veillez à la stricte propreté des zones concernées. Idéalement, utilisez un savon anti-bactérien deux fois par jour. Lorsque vous avez épilé les aisselles, évitez d'utiliser un déodorant anti-transpirant pendant 2 à 3 jours.

Puis-je utiliser d'autres méthodes d'épilation entre les différentes utilisations de l'appareil ?

Go Laser nécessite la présence d'un poil dans le follicule. Les méthodes d'épilation qui arrachent les poils, comme la cire, les épilateurs électriques, les pinces à épiler et les méthodes qui pincent les poils ne conviennent PAS entre les différentes utilisations de l'appareil. La décoloration de poils ne convient PAS non plus car elle élimine les pigments, rendant ainsi le laser inefficace. Le rasage, les disques de micro-dermabrasion et les crèmes dépilatoires sont des méthodes qui conviennent parfaitement entre les différentes utilisations de l'appareil.

SOINS POST-TRAITEMENT

À quelle fréquence puis-je répéter les traitements ?

Tant que vous n'observez aucune rougeur, douleur ou inflammation au niveau du follicule pileux et de la peau qui l'entoure, le traitement peut être répété au bout de 24 heures. La plupart des utilisateurs patientent 3 à 4 semaines entre deux traitements, afin de pouvoir identifier les poils qui sont tombés et ceux qui repoussent. L'intervalle entre les traitements de suivi n'est pas d'une importance primordiale. Choisissez un intervalle qui vous convient. Évitez de rester trop longtemps sur la même zone, lors d'un même traitement. Cela risquerait de provoquer des rougeurs et des gonflements.

Combien de traitements seront nécessaires ?


La réduction pilaire au laser est généralement considérée comme efficace et permanente au bout de 6 traitements, réalisés sur une période de 6 mois. Les résultats varient d'une personne à l'autre mais le nombre de traitements dépendra de la partie que vous traitez, de sa densité pilaire, de votre cycle de croissance pilaire et de la couleur de vos poils. Les poils foncés sur peaux claires répondent le mieux à l'épilation laser, mais

les poils foncés et clairs peuvent nécessiter plusieurs utilisations pour obtenir des résultats durables. Certaines personnes peuvent avoir besoin de plus de traitements, d'autres moins, pour arriver à un résultat satisfaisant. À chaque utilisation, vous remarquerez un éclaircissement progressif/une réduction progressive de la pousse des poils sur la zone concernée. Il est probable que les femmes souffrant de croissance pilaire excessive en raison d'hormones masculines nécessitent des soins sur le long terme.

À quel moment l'épilation laser est-elle la plus efficace ?

Le cycle de pousse du poil comporte 3 phases. L'efficacité de l'utilisation du laser est optimale lorsque les poils sont en phase de croissance active. Lors d'un même traitement, tous les follicules pileux ne sont pas dans cette phase de croissance active. Pour traiter tous les poils lorsqu'ils se trouvent en phase de croissance active, plusieurs traitements sont nécessaires.

CYCLE DE POUSSE DU POIL

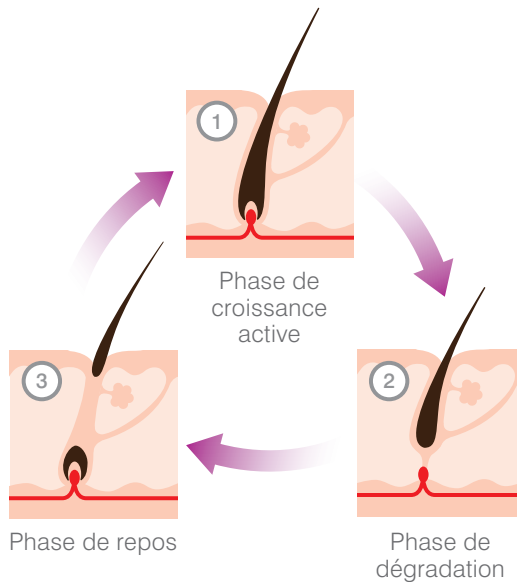

NETTOYAGE DE LA FENÊTRE LASER



Contrôlez régulièrement la fenêtre laser et assurez-vous qu'elle est exempte de dépôts de fumée. Une accumulation de dépôts réduit l'efficacité du laser.

Si vous constatez la présence de dépôts, éteignez l'appareil et débranchez l'adaptateur électrique. Puis nettoyez simplement à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'un coton-tige.

BONNE UTILISATION

- ✓ Débranchez toujours l'adaptateur électrique après utilisation et rangez-le dans un endroit hors de portée des enfants.
- ✓ Utilisez exclusivement cet appareil avec l'adaptateur électrique fourni.
- ✓ Pour protéger le laser, ne le conservez pas à des températures supérieures à 40° C.
- ✓ Une fois l'appareil débranché, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon légèrement humide, nettoyez régulièrement les broches de contact et la face avant de l'appareil à l'aide d'un coton-tige pour assurer un fonctionnement optimal du laser.
- ✓ Rangez toujours l'appareil et ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
- ✓ Pour garantir l'efficacité du laser, nettoyez régulièrement la fenêtre laser à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'un coton-tige, en veillant à ne laisser aucune fibre.
- ✓ Si vous constatez un fonctionnement inattendu de cet appareil, ceci peut être dû à des interférences électromagnétiques externes. Éloignez cette source d'interférences et redémarrez l'appareil pour rétablir un fonctionnement normal. À aucun moment le laser n'est émis involontairement.
- ✗ Ne PAS démonter ni réparer. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, contactez notre service après-vente.
- ✗ Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

DÉPISTAGE DES PANNES

Problème	Solution
J'ai perdu mes clés.	Relevez le numéro de série de votre appareil. Celui-ci se trouve sous l'appareil. Appelez notre service après-vente. Il se fera un plaisir de vous envoyer une clé de rechange.
Le laser ne fonctionne pas quand j'appuie sur le bouton Traitement.	Vérifiez que les broches de contact sont bien en contact avec la peau et que vous vous trouvez dans une pièce bien éclairée.
Les voyants, sur l'appareil, ne fonctionnent pas.	Vérifiez que la prise de l'adaptateur est bien branchée sur une prise murale et que le cordon est parfaitement inséré au dos de l'appareil. Lorsque les commandes de l'appareil ne sont pas utilisées pendant 20 minutes, l'appareil s'éteint. Pour le redémarrer, utilisez la clé de sécurité et saisissez la séquence du code de sécurité.

MODIFIER LE CODE DE SÉCURITÉ

Après avoir déverrouillé l'appareil à l'aide de la clé de sécurité et après avoir saisi la séquence de sécurité, vous pouvez paramétrer le code de sécurité de votre choix. AVANT d'appuyer sur n'importe quel autre bouton, appuyez sur ces boutons, dans l'ordre suivant :

bouton Traitement : 3 fois, Mode scan : 3 fois, Mode un seul poil : 3 fois et Traitement : 3 fois

Le voyant de l'intensité 5 clignote.

Saisissez la séquence du code de sécurité de votre choix qui doit être composée de quatre pressions sur les boutons (à l'exception du bouton Traitement). Chaque pression sur un bouton sera indiqué par les voyants des intensités 1 à 4. Les voyants des cinq intensités clignotent tous pour confirmer que votre code de sécurité a été accepté. Notez votre code de sécurité pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Si le code de sécurité de votre choix n'est pas saisi dans les 20 secondes qui suivent l'appui sur le bouton Traitement, l'appareil se "verrouille". Les 5 niveaux d'intensité clignotent. Votre code de sécurité n'est pas enregistré. Pour redémarrer l'appareil, tournez la clé de sécurité sur off/on puis saisissez de nouveau la séquence de sécurité initiale.

NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ CES PRODUITS POUR VOUS

Deep Pore Cleanser

Utilise la technologie du micro-courant pour une action nettoyante, hydratante et rafraîchissante. La peau est revigorée, éclatante et nettoyée en profondeur.



GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur :
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

ÉLIMINATION



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEE) (2002/96/EC) a été mise en œuvre en vue de recycler les produits en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accroître la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il NE doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés, veuillez appeler notre Service après-vente au :
+44 1242 702345

ou nous adresser un e-mail à cette adresse : **online@riobeauty.com**

Pour vos commandes d'accessoires, rendez-vous sur le site www.riobeauty.com ou contactez votre distributeur local.



CLASS 1
LASER PRODUCT

CLASS 1 PRODUCT
CONTAINING
CLASS 3B LASER



LASER SAFE[®]
TECHNOLOGY

F



Rio, Dezac et Go Laser Hair Remover sont des marques commerciales de The Dezac Group Ltd
© The Dezac Group Ltd 2014. Fabriqué par The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, Angleterre GL53 7ET

www.riobeauty.com

1-IN-LAHH-F/1.1